

GP Cleaner : solution de nettoyage pour lentilles rigides perméables au gaz



Conditionnement
30 ml

POINTS FORTS

- **Pouvoir nettoyant sans risque d'abrasion**

Composé d'un agent surfactant non ionique, GP Cleaner nettoie les dépôts de surface des lentilles rigides sans risque d'abrasion. Cette propriété est particulièrement intéressante pour les lentilles à fort Dk dont les surfaces sont plus tendres donc plus sensibles aux rayures.

- **Combinaison possible avec toutes les solutions d'entretien**

GP Cleaner peut être utilisé en cours de port et/ou au retrait des lentilles en 1^{ère} étape d'entretien, quel que soit l'entretien habituel.

INDICATION PRINCIPALE

- Les porteurs de lentilles de contact rigides perméables au gaz dont la vision se brouille pendant le port par l'accumulation de dépôts de surface et qui ne souhaitent pas entretenir leurs lentilles avec un système oxydant

MODE D'EMPLOI


1. Avant de manipuler les lentilles de contact, se laver et se sécher soigneusement les mains.
2. Retirer la lentille et la déposer sur la paume de la main. Déposer une goutte de GP Cleaner et masser les deux faces de la lentille pendant plusieurs secondes pour décoller les dépôts accumulés.
3. Rincer très abondamment la lentille pour éliminer à la fois les dépôts décollés et toute trace de GP Cleaner.
4. Si le nettoyage intervient en cours de port, la lentille alors rincée peut être remise dans l'œil. Si le nettoyage est réalisé au retrait en fin de journée, la lentille peut maintenant être placée dans l'alvéole correspondante de l'étui de la solution d'entretien (suivre alors le mode d'emploi du produit d'entretien utilisé).
5. Procéder de la même façon pour l'autre lentille.
 - Ne mettre qu'une goutte de GP Cleaner par lentille (savon très concentré)
 - Utiliser selon les besoins et jusqu'à 4 fois par jour
 - Une fois le flacon ouvert, l'utiliser sous 3 mois et ne jamais le laisser ouvert entre deux instillations
 - Ne jamais mettre GP Cleaner directement dans les yeux (rappel du bouchon rouge)
 - Ne jamais remettre une lentille nettoyée avec GP Cleaner si elle n'a pas été rincée de façon abondante auparavant
 - Ne jamais mettre en contact l'embout du flacon avec quelque surface que ce soit et éviter tout contact direct avec la lentille

COMPOSITION


- ✓ Agent surfactant non ionique, Boric / Borax, Chlorure de sodium

DÉCISIONNEL SOLUTIONS LENTILLES

PORTEUR DE LENTILLES RIGIDES

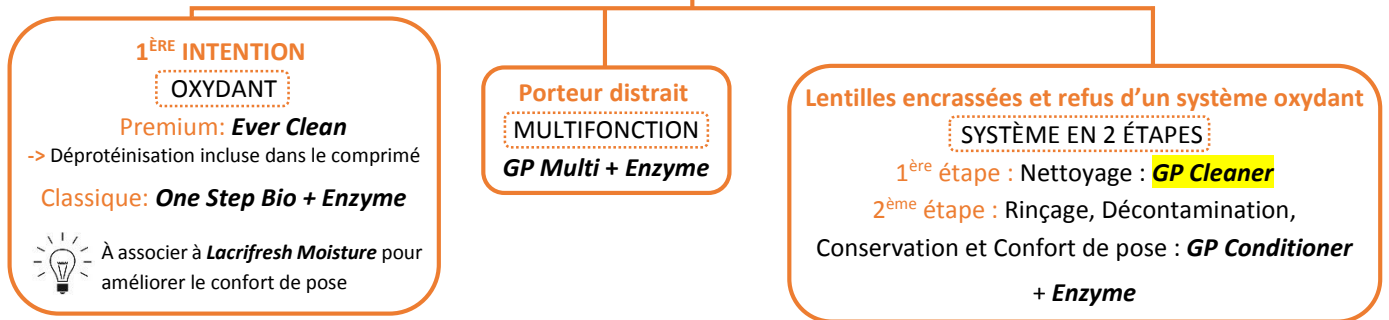

PORTEUR DE LENTILLES SOUPLES OU RIGIDES

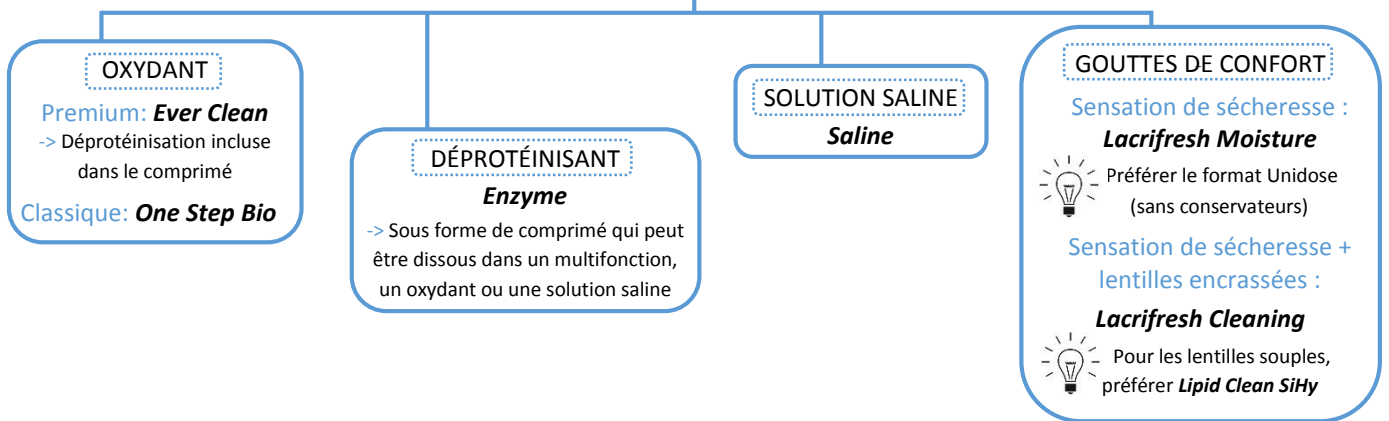

PORTEUR DE LENTILLES SOUPLES

